

시선 응시 의사소통 앱

빠른 사용 안내서 · 꼭 필요한 것만

환자는 왼쪽과 오른쪽을 응시하여 말합니다. 한 번 응시할 때마다 숫자 하나가 입력되고, 중앙을 2 초간 응시하면 단어가 완성되어 기기가 소리내어 읽어 줍니다.

별도의 장비도, 키보드도, 글자 조합도 필요 없습니다. 갤럭시 폰이나 태블릿의 전면 카메라만 있으면 됩니다.

세 가지 시선 동작

왼쪽 응시	= 0	코드에 숫자 0 이 입력됩니다
오른쪽 응시	= 1	코드에 숫자 1 이 입력됩니다
중앙 응시	2 초	확정 — 단어가 음성으로 발화됩니다

예시: "불편해" = 011 → 왼쪽, 오른쪽, 오른쪽, 그다음 중앙을 2 초간 응시




왼쪽 (0)



오른쪽 (1)



오른쪽 (1)

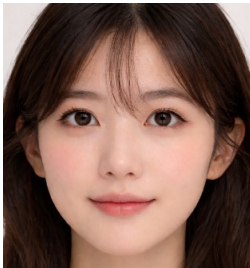

중앙 (2 초)

잘못 입력했다면? 그냥 중앙을 2 초간 응시하세요. 단어북에 없는 코드는 자동으로 무시되며, 곧바로 다시 만들 수 있습니다.

안전: 이 앱은 보조 의사소통 도구이며 의료 기기가 아닙니다. 항상 보호자가 함께 있어야 하며, 응급 상황을 알릴 별도의 수단을 반드시 갖추어야 합니다.

1. 설치하기



기기 설치 위치

기기 위치 잡기

- 환자 얼굴에서 약 30cm 거리
- 카메라는 눈높이에, 시야를 가리지 않도록 살짝 위쪽으로
- 환자 얼굴이 카메라 화면 중앙에 오도록
- 조명은 환자 앞쪽에 — 환자 뒤 창문(역광)은 피하기
- 사용 전 카메라 렌즈 닦기

안경: 가능하면 벗고 사용하세요. 꼭 써야 한다면 카메라 미리보기에 렌즈 반사가 보이지 않을 때까지 기기나 머리 각도를 조금씩 조정하세요. 반사는 홍채 감지를 방해합니다.

첫 실행 — 세 번의 터치

1	화면 상단에서 언어 선택: 한국어 또는 English. 메뉴, 단어 목록, 음성이 모두 함께 바뀝니다.
2	고지사항을 읽고 "수락"을 누릅니다.
3	안내 화면에서 기기 종류(Galaxy Phone / Galaxy Tab)를 선택합니다. 앱이 카메라 위치를 파악하는 데 필요합니다.

버튼 세 개

버튼	기능
시작	카메라를 켜고 시선 추적을 시작합니다. 상태 표시기가 초록색(추적 중)으로 바뀝니다.
일시정지 / 재개	추적을 잠시 멈춥니다(카메라는 켜진 상태). 상태 표시기가 주황색(일시정지)으로 바뀝니다.
정지	카메라를 끄고 모든 추적을 중지합니다.

환자 혼자서도 일시정지할 수 있습니다. 눈을 5 초 이상 감으면 일시정지되고, 다시 5 초 이상 감으면 재개됩니다. 쉬거나 잠들 때, 방문객과 대화할 때 사용하세요.

가로 모드? 세로 모드?

- Galaxy Tab 은 가로 모드를 권장합니다. 세로 모드에서는 카메라가 옆으로 치우쳐 인식률이 떨어집니다.
- Galaxy Phone 은 가로·세로 모두 사용 가능합니다.
- Tab 에서는 글자가 약 1.7 배 커지고 화면 중앙 쪽으로 정렬되어 눈의 이동이 줄어듭니다.

환자가 사용하기 전에: 보호자가 먼저 직접 사용해 보세요. 10 분만 연습해도 환자에게 훨씬 쉽게 알려줄 수 있습니다.

2. 메인 단어표

대부분의 경우 이 표 하나면 충분합니다. 코드가 짧을수록 급한 단어이며, 긴급 단어는 단 한 번의 응시로 말할 수 있습니다.

코드	시선 동작	발화되는 말
0	좌 → 중앙	숨막혀
1	우 → 중앙	씩션
00	좌 좌 → 중앙	예
01	좌 우 → 중앙	아니오
10	우 좌 → 중앙	다시해요
11	우 우 → 중앙	기다려요
000	좌 좌 좌 → 중앙	목말라 ★
001	좌 좌 우 → 중앙	소변 ★
010	좌 우 좌 → 중앙	대변 ★
011	좌 우 우 → 중앙	불편해 ★
100	우 좌 좌 → 중앙	통증 페이지로 이동
101	우 좌 우 → 중앙	행동 페이지로 이동
110	우 우 좌 → 중앙	환경·상태 페이지로 이동
111	우 우 우 → 중앙	감정 페이지로 이동

빨간색	긴급 — 한 번의 응시로 발화
초록색	예 / 아니오 / 다시해요 / 기다려요 — 질문에 답할 때
노란색	★ 단축 슬롯 — 이 네 칸은 자동으로 바뀝니다 (아래 참조)
파란색	네 개의 카테고리 페이지로 가는 입구

★ 노란색 단축 슬롯은 스스로 학습합니다

- 카테고리 페이지에서 단어를 고를 때마다 그 단어의 사용 횟수가 1 씩 올라갑니다.
- 가장 많이 쓴 단어 4 개가 자동으로 노란색 슬롯(000~011)에 올라와, 자주 쓰는 말일수록 코드가 짧아집니다.
- 사용 기록이 쌓이기 전까지는 기본값(목말라 / 소변 / 대변 / 불편해)이 유지됩니다.
- 확인·초기화: 설정 → Zone 3A — 사용 빈도 → 보기 / 사용 횟수 초기화

연습 순서: 빨간색·초록색 단어(1~2 회 응시)부터 익숙해질 때까지 연습하세요. 그다음 노란색 단축 슬롯, 마지막으로 카테고리 페이지를 하나씩 도입합니다. 한 번에 10~15 분씩 짧게 하는 편이 더 효과적입니다.

3. 네 개의 카테고리 페이지

3 자리 코드를 입력하면 카테고리 페이지가 열립니다. 이때 코드는 빈 상태로 초기화되고, 짧은 코드 하나를 더 입력해 단어를 고릅니다. 단어가 발화되면 앱이 자동으로 메인으로 돌아갑니다. 왼쪽 + 중앙(코드 0)은 언제나 메인으로 복귀합니다.

통증 코드 100 (우 좌 좌)		행동 코드 101 (우 좌 우)	
0	← 메인으로	0	← 메인으로
1	배 아파	1	약 줘
00	머리 아파	00	자세 바꿔줘
01	등 아파	01	돌려줘
10	목 아파	10	머리 올려줘
11	가슴 아파	11	머리 내려줘
000	메스꺼워	000	닦아줘
001	입이 말라	001	덮어줘
010	눈이 건조해	010	간호사 불러줘
011 ~ 111	빈 슬롯 — 추가 가능	011	이리 와줘
		100	앉혀줘
		101	가만히 있게해줘
		110	쉬게해줘
		111	소변 도와줘

환경 · 상태 코드 110 (우 우 좌)		감정 코드 111 (우 우 우)	
0	← 메인으로	0	← 메인으로
1	추워	1	고마워
00	더워	00	미안해
01	너무 밝아	01	불안해
10	너무 어두워	10	무서워
11	너무 시끄러워	11	슬퍼
000	졸려	000	외로워
001	가려워	001	행복해
010	목말라	010	힘들어
011	불편해	011	화나
100 ~ 111	빈 슬롯 — 추가 가능	100	보고 싶어
		101 ~ 111	빈 슬롯 — 추가 가능

단어 직접 추가하기: 안내 화면 → 설정 → 빈 *** 슬롯을 탭 → 문구 입력 → 저장, 마지막에 "저장 후 돌아가기". 음성이 또렷하게 나오도록 1~3 단어의 짧은 표현을 권장합니다. 단, 세 가지는 바꿀 수 없습니다 — "숨막혀"(코드 0), 카테고리 페이지의 "메인으로"(코드 0), 카테고리 입구 4 개(100~111).

4. 실제 사용 예시 4 가지

말하고 싶은 것	이렇게 하세요
"숨막혀"	좌 → 중앙 2 초. 즉시 발화됩니다.
"머리 아파"	우 좌 좌 → 중앙 2 초 (통증 페이지 열림) → 좌 좌 → 중앙 2 초.
"고마워"	우 우 우 → 중앙 2 초 (감정 페이지 열림) → 우 → 중앙 2 초.
메인으로 돌아가기	좌 → 중앙 2 초. 음성은 나오지 않습니다.

5. 잘 안 될 때

증상	해결 방법
카메라가 켜지지 않음	Android 설정 → 앱 → ALS 시선 응시 → 권한 → 카메라 허용
음성이 나오지 않음	먼저 볼륨 버튼 확인. 그다음 Android 설정 → 일반 관리 → 언어 및 입력 → 텍스트 음성 변환(TTS) 확인
시선이 인식되지 않음	조명을 더 밝게. 렌즈를 닦기. 기기를 더 가까이. 안경을 벗거나, 반사가 사라질 때까지 기기 각도 조정
작은 움직임에도 반응함	눈꺼풀이 반쯤 감겨 있지 않은지 확인하세요. 일상적인 작은 안구 움직임은 코드로 입력되지 않아야 합니다.
영똥한 단어가 발화됨	"다시해요"(10) 또는 "기다려요"(11)로 보호자에게 알린 뒤, 원하는 코드를 다시 입력하세요.
노란색 슬롯에 예상 밖의 단어	설정 → Zone 3A – 사용 빈도 → 사용 횟수 초기화
단어가 다른 언어로 표시됨	고지사항 화면으로 돌아가 언어를 다시 선택하세요.

안전 고지사항

이 앱은 보조 의사소통 도구입니다. 의료 기기가 아니며, 응급 상황에서 환자가 사람을 부를 수 있는 유일한 수단이 되어서는 안 됩니다.

- 항상 보호자가 함께 있고 환자를 지켜보는 상태에서 사용하세요.
- 응급 알림을 위한 별도의 수단을 항상 손 닿는 곳에 두세요.
- 장기 사용 전에는 언어치료사의 평가를 받으시기 바랍니다.

개발자는 이 앱의 사용으로 발생하는 어떠한 결과에도 법적 책임을 지지 않습니다. 이 앱을 사용함으로써 귀하는 관련된 모든 위험을 인지하고 수락하는 것으로 간주합니다.

이 문서는 요약본입니다. 설정 화면 전체 사용법, 기기 화면 방향별 레이아웃, 자세한 훈련 지침은 전체 사용자 매뉴얼을 참고하세요.